

平素は Ivoclar Vivadent 製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。今月の最新情報をお知らせいたします。

NEW 接着性レジンセメント マルチリンク オートミックス M+ キットを8月発売

Multilink® Automix

マルチリンク オートミックスのモノボンドプラス入キットを8月から発売します。

発売日：2009年8月1日

特長

接着性レジンセメント マルチリンク オートミックス

- 1.あらゆる補綴物に、高い接着力。
- 2.シンプルな操作手順。
- 3.補綴物や補綴部位によって選べる重合方法（光重合、化学重合）。
- 4.症例に合わせて選べる3色（オパール、トランスペアレント、イエロー）。

修復物前処理材 モノボンドプラス

- 1.これまでのメタル/ジルコニアプライマー（メタル処理）とモノボンドS（シラン処理）がひとつに。
- 2.間接修復物の前処理に1本で対応。修復物の接着力をUP。
- 3.適応修復物：メタル、ジルコニア、オールセラミックス（シリケート）、コンポジットレジン。



▶ 製品詳細は別紙へ

NEW 「CRT患者向インフォメーション」を8月発売

Caries Risk Test



CRT（唾液検査キット）患者用リーフレットの販売を開始いたします。

※CRTバクテリア製品には本リーフレットと患者名を記入できるシールを無償添付いたします。

発売日：2009年8月1日

▶ 製品詳細は別紙へ

NEW 歯科用光学印象採得補助材（IPS e.max キャド 付属品） 「IPS コントラストスプレー チェアサイド クリームレモン」を9月発売

IPS® Contrast Spray

発売日：2009年9月21日



特長

- 1.湿式スプレー採用で、歯牙や周辺組織へしっかり定着、滑沢な塗布面で鮮明なスキャニングが可能。
- 2.歯面への前処理が不要、またスキャニング後もうがいできれいに洗い流せる。
- 3.交換可能なノズルで衛生的。

※クリームレモン発売に伴い、従来品は在庫限りで販売中止となります。

▶ 製品詳細は別紙へ

「オプトラゲート」トライアルキャンペーン開催中

Optra Gate®

期間：2009年7月1日～9月末日



期間中、ソフト開口器オプトラゲートを特別価格にて販売いたします。別途リーフレットをご用意しておりますので、お申し付けください。

8月 夏季休業日のご案内（8月12～14日休業）

最終出荷：8月11日（火）14時以降のご注文は、17日の出荷となります。

休業日：2009年8月12～14日

出荷再開：8月17日（月）より通常業務をいたします。夏季休暇中は、出荷業務が一切できませんのでご了承ください。



セミナーレポート PMTCセミナー

Seminar Report



6月28日(日)長野市で行われた滝沢歯科器械店様主催のデンタルショーにて、Ivoclar Vivadent プロフェッショナルケア アドバイザー 田嶋美樹先生による「歯科衛生士が行う PMTCマネージメント」セミナーを開催しました。このセミナーは事前登録制で、100名を超える歯科衛生士さんにご参加いただきました。セミナーの内容は、PMTCの基本ステップの確認、ワンランク上を目指したPMTCテクニック、日々の診療への取り入れ方などをお話いただきました。また、セミナーが行われたブースでのテーブルクリニックも大盛況でした。

www.ivoclarvivadent.jp

セミナー情報

歯科衛生士のための唾液検査セミナー

内容：唾液検査の導入セミナー

対象：歯科衛生士の方で、これから唾液検査の導入を考えている、または導入しているがもっと患者様の指導に活用されたい方
講師：角田まり子先生 受講料：10,000円(消費税込、材料、軽食代を含む) 会場・日程：東京 8月9日(日) 13時～17時

IPSインライン/インラインPoM ベーシックコース

内容：IPS インラインの臨床使用への導入コース

対象：歯科技工士の方で、IPSインライン/インラインPoMの購入者または購入希望者

講師：Ivoclar Vivadent テクニカルアドバイザー 林洋平 受講料：10,000円(消費税、材料、昼食代を含む)
会場・日程：東京 | 8月2日(日), 9月6日(日), 10月4日(日), 11月8日(日), 12月6日(日)

IPS e.max キャド ベーシックコース

内容：IPS e.max キャドの臨床使用への導入コース

対象：セレックシステムをお使いの歯科医師の方

講師：草間幸夫先生 受講料：30,000円(消費税込、材料、昼食代を含む) 会場・日程：大阪 | 11月 8日(日) 東京 | 12月 6日(日)

IPS エンプレスCAD ステイニング実習会

内容：IPS エンプレスCADを使用したステイニングを学びたい方

対象：セレックシステムをお使いの歯科医師または歯科技工士の方

講師：田村勝美先生 受講料：30,000円(消費税込、材料、昼食代を含む) 会場・日程：東京 | 10月25日(日), 12月20日(日)

IPSエンプレス/IPS e.max プレスセミナー

内容：IPSエンプレス、およびIPS e.max プレスの臨床使用への導入コース

対象：歯科技工士の方で、IPSエンプレス、およびIPS e.max プレスの購入者または購入希望者

講師：城山幸助先生 受講料：30,000円(消費税込、材料、2日間昼食代を含む)

会場・日程(各回土日開催)：東京 | 11月21～22日 大阪 | 10月3～4日, 12月5～6日
※東京 8月8～9日、8月29～30日開催分は満員となりました。

IPS e.max ジルプレス/IPS e.max キャド セミナー

内容：IPS e.max ジルプレス/IPS e.max キャドの臨床使用への導入コース

対象：歯科技工士の方で、IPS e.max ジルプレス/IPS e.max キャドの購入者または購入希望者

講師：赤坂政彦先生 受講料：30,000円(消費税込、材料、2日目昼食代を含む) ※プレスセミナー受講者は25,000円にて受講可

会場・日程(各回土日開催)：東京 | 10月17～18日 大阪 | 8月1～2日, 11月28～29日

BPSテクニカル 認定コース

内容：BPS認定歯科技工士を取得し、臨床使用への認定コース

対象：歯科技工士 講師：佐藤幸司先生 受講料：150,000円(消費税込、材料、4日間昼食代を含む)

会場・日程(各回土日開催)：9月12～13日、10月10～11日 ICDE Tokyo (Ivoclar Vivadent 株式会社セミナールーム)

※コースをお申込の方には、BPS関連器材2製品の標準価格を10% OFFにて販売いたします。詳細はお問い合わせください。

BPSクリニカル 認定コース

内容：BPS認定歯科医師を取得し、臨床使用への認定コース

対象：歯科医師 講師：吉木邦男先生 佐藤貴映先生 受講料：130,000円(消費税込、材料、2日間昼食代、懇親会費を含む)

会場・日程：埼玉 | 11月22日(日)～23日(月・祝) ひかり歯科クリニック(埼玉県和光市)

大阪 | 10月31日(土)～11月1日(日) 伊藤歯科医院(大阪市淀川区)

※コースをお申込の先生方には、BPS関連器材3製品の標準価格を10% OFFにて販売いたします。詳細はお問い合わせください。

* 別途リーフレットをご用意しております。セミナーに関してのお問い合わせはマーケティング部(03-5844-6191)までお問い合わせください。

一般的名称：歯科接着用レジンセメント / 販売名：マルチリンク / 認証番号：221AGBZX00186000 / 管理医療機器
一般的名称：歯科技工用セラミックス表面処理材料 / 販売名：モノボンドプラス / 届出番号：13B1X10049IV0021 / 一般医療機器
一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 販売名：IPS e.max キャド 認証番号：220AGBZX00008000 管理医療機器
一般的名称：歯科用開口器 / 販売名：オプトラゲート / 届出番号：13B1X10049IV0001 / 一般医療機器

クリニカル製品紹介

Multilink Automix

今回は、あらゆる補綴物に高い接着力！を発揮する「マルチリンク オートミックス」をご紹介します。

Ivoclar Vivadent の接着性レジンセメントって色々あるけど、違いは？

「バリオリック II」・・・2000万症例以上の実績を誇る優れた審美性を有するレジンセメント。

でも、操作が少々複雑なので、プロフェッショナル向け。

「バリオリック ベニア」・・・明度による7種類のシェードと光重合のみのベニア用。

「マルチリンク オートミックス」・・・シンプルな操作手順で、幅広い症例に使用できる高品質なレジンセメント。

3種類あって、用途ごとに使い分けができるんだね。

では今回は「マルチリンク オートミックス」に的を絞って紹介します。

今流行りのオートミックスシリンジは、気泡が防げて誰でも均一な混和比・混和状態で使用できるから

便利だよ。あと、補綴物への塗布も直接シリンジからできるし、操作時間が短縮できるよ。

操作時間といえば、マルチリンクは操作がかなり簡単です。

え！そうなの？どんな風に？

補綴物への前処理は「モノボンドプラス」を塗布するだけです。

モノボンドプラスは、シラン系・リン酸系・イオウ系、全てに対応できるプライマーで、

補綴物内面に塗布して60秒後にエアで乾燥します。

それだけ？じゃあ歯面は？

歯質への前処理は、「マルチリンク プライマー A/B」を組み合わせ使用しますが、

ワンステップのプライマーで、エッチングやボンディングがいりません。

A液とB液を1：1で混ぜ合わせ歯面に15秒間塗布するだけの簡単ステップです。

簡単なのは良いことだけど、接着力が心配だな～？

プライマー A/Bは優れた辺縁封鎖性で高い接着力を得られます。

それにデュアルキュア型なので、光の届かないポストなどでも使用できます。

セメントもデュアルキュアだよな？


光重合でも、デュアルキュアでもOKです。補綴物や部位によって重合方法が選べるし、

シェードも3色（イエロー、トランスペアレント、オペーク）あるから症例に合わせて選べます。

接着力も歯質に対して20MPa以上、ジルコニアやオールセラミックスには25MPa以上と高い接着力を有します。

色々な種類のセメントを用意するのも大変だけど、マルチリンクならどんな症例でも使用できるんだね。

早速注文しようっと。ディーラーさん、在庫あるかな？

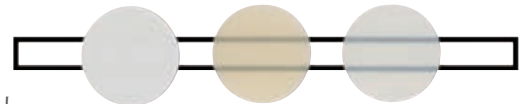

Multilink® Automix マルチリンク オートミックス

システムパック

シリンジいずれか1種と、各ステップに必要な製品を含んだセット品です。

- ・オートミックス シリンジ 9g × 1本 (トランスペアレント / オペーク / イエロー)
- ・マルチリンク プライマー A/B 2種 各 3g ・モノボンドプラス 5g × 1本
- ・その他付属品 (ミキシングパッド / ミキシングプレート / アプリケーター / チップ2種)

リフィル

- － オートミックス シリンジ 9g × 1本 (トランスペアレント / オペーク / イエロー)
- － ミキシングチップ 15本



一般的名称：歯科接着用レジンセメント / 販売名：マルチリンク / 認証番号：221AGBZX00186000 / 管理医療機器

All Ceramics , All You Need.

IPS e.max ZirCAD

イットリウム安定型酸化ジルコニウムブロック
IPS e.max ジルキヤド

IPS e.max シリーズ 最後になりました。

最後にご紹介するのはイットリウム安定型のCAD/CAM用酸化ジルコニウム製ブロック「IPS e.max ジルキヤド」です。

イットリウム安定型酸化ジルコニウムブロック

CAD/CAM用のジルコニアブロックだね。で、イットリウム安定型ってどういう型？

イットリウム？わからないから調べてみました。

イットリウム 原子番号39の元素。元素記号Y。灰色の金属で、常温・常圧で安定な結晶構造。

なんとなくわかったぞ〜。だから灰色の金属みたいなブロックなんだ！

そうかもしれないね。

曲げ強度900MPa

で、ジルキヤドは曲げ強度が900MPa、IPS e.max プレスやIPS e.max キヤドの倍以上！

生態親和性にも優れていて、単冠からロングスパンブリッジまで対応できます。

強くて優しくて力持ちって感じだね。

力持ちは余計かな？強くて優しくて何でも受け止めちゃうって感じかな。

それ、正解。〜受け止めるには力が必要・・・余計にうるさい。

従いまして、IPS e.max ジルプレスを高強度のIPS e.max ジルキヤドにプレスしたり、

IPS e.max セラムを使用してフレームにベニアリングしたりと、

IPS e.max ジルキヤドはIPS e.max マテリアルの適応範囲で優れた補助材なのです。



これまで6回にわたり連載してきましたIPS e.max のオールセラミックシステムはいかがでしたか？

プレス技法とCAD/CAM技法を組み合わせ、様々な症例に対応できるこのシステムは、きっとお客様のニーズに答え、患者様の笑顔につながることでしょ。

Ivoclar Vivadent では、IPS e.maxの各種セミナーを開催しております。詳しくはセミナー情報をご覧ください。

皆様のご参加お待ちしております。

■ マルチリンク 製品詳細

発売日：2009年8月1日

Item No.	製品名	単位	標準価格	EAN コード	JDMN	クラス	備考
627471AN	マルチリンク オートミックス Tシステムパック M+	1 セット	32,000	04580268344017	70836002	II	
627472AN	マルチリンク オートミックス Oシステムパック M+	1 セット	32,000	04580268344024	70836002	II	
627473AN	マルチリンク オートミックス Yシステムパック M+	1 セット	32,000	04580268344031	70836002	II	
626221AN	モノボンドプラス	5 g × 1	13,000	04580268343867	70918000	I	

■ CRT 患者向インフォメーション 製品詳細

発売日：2009年8月1日

Item No.	製品名	単位	標準価格	EAN コード	JDMN	クラス	備考
JP553545	CRT 患者向インフォメーション	50 枚 × 1	3,000	04580268344086	-	雑品	

■ (IPS e.max キャド) IPS コントラストスプレー Chairside クリームレモン 製品詳細

発売日：2009年9月21日

Item No.	製品名	単位	標準価格	EAN コード	JDMN	クラス	備考
614435AN	IPS コントラストスプレー Chairside クリームレモン	50mL × 1	16,800	04580268341801	70805000	II	

■ オプトラゲート キャンペーン 製品詳細

期間：2009年7月1日～9月末日

Item No.	製品名	単位	備考	標準価格	特別価格
577275AN	オプトラゲート アソートメント	1セット	レギュラー / スモール 各 40 枚	24,000	▶ 12,000
590850AN	オプトラゲート レギュラー (R)	80枚×1		24,000	▶ 12,000
590851AN	オプトラゲート スモール (S)	80枚×1		24,000	▶ 12,000
591451AN	オプトラゲート ジュニア (J)	80枚×1		24,000	▶ 12,000
590852AN	オプトラゲート プロモパック	1セット	レギュラー / スモール 各 4 枚	1,980	▶ 1,200