

FOR YOU

Ivoclar Vivadent K.K.
News Letter
2015/3/2

Vol.73



IPS e.max プレス MT を発売!

平素は Ivoclar Vivadent 製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。今月の最新情報をお知らせいたします。

NEW 「IPS e.max プレス MT」を発売!

IPS e.max Press MT

中透明度の高強度ガラスセラミックス インゴット、「IPS e.max プレス MT」を発売します。

発売日: 2015年4月1日

特長

1. 透明度が HT と LT の中間で、HT より明度が高く、LT より透明度が高い修復物の製作が可能。
2. 透明度の選択肢が広がり、ケースに応じたより審美性が高い修復物の製作が簡単に。
3. S サイズで7種類のシェード (BL2、BL3、BL4、A1、A2、A3、B1) をラインナップ。
4. 従来のインパルス バリューに対応。



V1 MT B1

V2 MT BL4

V3 MT BL3



ウィンターキャンペーン2015、間もなく終了!

Campaign 2015

ペンタイプの便利なボンディング材「アドヒース ユニバーサル VivaPen」のお試しサイズ、スターターキットを特別価格にて発売するキャンペーンを開催中です。キャンペーンの最終月となっておりますので、この機会に是非 VivaPen の操作性をお試しください。

期間: 2015年1月5日~3月31日

▶ 詳細は本誌中面、およびキャンペーンリーフレットをご覧ください。



価格改定のお知らせ

Information

原材料の高騰に伴い、2015年4月1日より標準価格の改定を実施させていただきます。皆様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、新価格につきましては、別途製品群ごとに標準価格表をご用意しておりますので、ご利用ください。

実施日: 2015年4月1日



各種お知らせ

Information

- ・在庫限りで販売終了となる、CRT ビーカーの代替品「プラスチック ビーカー」を発売します。
- ・SR アドロー アドオン、IPS e.max プレス インパルス バリューを在庫限りで販売終了します。
- ・オプトラコンタクト、バリオリック II キット製品の一部を在庫限りで販売終了します。
- ・アドヒース ユニバーサル VivaPen 2mL の製品番号が、在庫がなくなり次第変更となります。

Topic

製品紹介 アドヒース ユニバーサル、IPS e.max プレス MT を掲載しています。

一般的名称: 歯科加工成形用セラミックス / 販売名: IPS e.max プレス / 認証番号: 220AGBZX00010000 / 管理医療機器
一般的名称: 歯科用象牙質接着材 / 販売名: アドヒース ユニバーサル / 認証番号: 226AGBZX00069000 / 管理医療機器

Ivoclar Vivadent K.K. News Letter FOR YOU Vol.73 | 2015/3/2

www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24 TEL 03-6801-1301 FAX 03-5844-3657

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Adhese® Universal

光重合型一液性ボンディング材 アドヒース ユニバーサル

昨年10月に発売したボンディング材「アドヒース ユニバーサル」、今回はVivaPenに焦点を当てて、その魅力に迫ります。

● ブラシ付きカニューレ

角度が付いたブラシ付きのカニューレで、口腔内のどの場所にも塗布しやすくなっています。先端も270°回転できます。

● 誰もが慣れているペンの操作

片手で握って窩洞や支台歯に直接塗布できます。

● クリックで補充

ボタンをクリックするだけで、口腔内で塗布しながら必要な量を簡単に補給できます。ボトルタイプのように、混和皿と口腔内でブラシを何度も往復させる煩わしさがありません。特にマイクロスコープやルーペを使用する場合は、レンズを覗いたまま塗布できるので、診療に集中できます。


● 保管も考慮したデザイン

VivaPenは密閉性が高く、溶媒の蒸発を抑える構造で、ボトルタイプで起こりがちな蒸発による減量や濃縮などがほとんどみられません。アドヒース ユニバーサルの高い物性を最後まで発揮できます。残量メータもついており、使用状況の確認もできます。

経済的

毎日の診療に欠かせないボンディング材ですので、コストはもちろん重要です。容量2mLのVivaPenは約192歯に使用できます。1本で145歯に使用できるボトルタイプ(5g)と比べると、1mLあたりの使用可能数は約3倍という結果も発表されています*1。ボトルとVivaPenの1滴を比較してもその差は一目瞭然です(●)。1回あたりの単価を標準価格で比較すると、ボトルは約104円に対し、VivaPen(2mL)はカニューレの価格を入れても約92円と、実はVivaPenの方がコストを抑えられるのです*2。もっと多くの先生方にVivaPenをお使い頂けるよう、今回の価格改定でカニューレの価格を見直しました。これまで気付かなかったボトルタイプのムダ使いをVivaPenで解消してみませんか。

*1 Berndt & Partner: VivaPen Benchmarking Study, August 2013 *2 2015年4月 価格改定後の標準価格を基にした計算です。

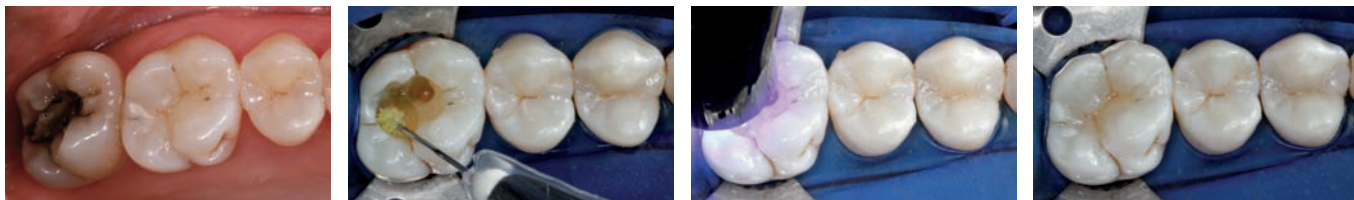

Dr. S. Huth, Ivoclar Vivadent AG

ウィンターキャンペーン 実施中! 3/31 まで Winter Campaign

3月31日まで、0.5mLのお試しサイズ「アドヒース ユニバーサル スターターキット」を特別価格で販売しております。魅力が満載のVivaPenを、まずは一度、是非お試しください。



IPS e.max® Press MT

Vシェードに代わる中透明度のガラスセラミックス IPS e.max プレス MT

昨年12月のセンセーショナルなIPS e.max プレス Multi発売に続き、4月1日にMTインゴットの発売が決定しました。

IPS e.max 進化を続ける、オールセラミックス

MTは“ミディアム”トランスルーセンシーの意味で、従来からあるHTとLTの間となる透明度を持っています(①)。これはどこかで聞いたような…。そう、日本では2011年4月に発売をした、インパルスのV(バリュー)シェードに相当する透明度となります。

これまでVシェードは3種類のラインナップで、限られたシェードレンジで活用して頂いていました。今回のMT発売で、HTやLTと同様にA-Dおよびブリーチシェードでの表記となり、選択がしやすくなりました。シェードも7種類となり、より多くのシェードに対応しています。また、今年の夏頃には、さらにB2・C1・D2シェードが加わり、Lサイズのインゴットも発売を予定しています。

V(バリュー)シェードに代わる、MTの活用ケース

HTでは透明度が高く、低明度な支台歯の影響を受けて暗くなったり、LTよりはもう少し透明感が必要。そんなケースでMTは活躍します。従来のVシェードも、それを解決するために、世界から寄せられた要望で生まれたインゴットでした。実は日本でもVシェードは売れ筋シェードの1つです。「どんなケースで使えばいいかわからない」という声を頂くVシェードですが、プログラマット ユーザー様の中には、Vシェードが最も使うインゴットという方もいらっしゃいます。間をとれるという意味では、適応範囲が広い透明度と言えるかもしれません。まだVシェードをお使いではなかった皆様も、A-Dおよびブリーチシェードとなって選択がしやすくなりましたので、まずは試して頂くのに良い機会かと思えます。今回のMT発売に伴い、Vシェードは国内の在庫限りで販売終了となりますが、MTシェードでカバーしておりますので、現在ご愛用の方もご安心ください(②)。

シェード選択

IPS e.max プレスを使用した修復物製作では、支台歯のシェードを再現する「IPS ナチュラルダイマテリアル」を、ケースに応じてご使用頂いている方も多いと思います(③)。ガラスセラミックスの審美性は、この誌面であえて言うまでもなく確固たる地位を築いていると思いますが、透明度が高い分、審美性を求める上では支台歯のシェードを考慮する必要があります。IPS e.maxでは、選択する材料のシェードは、支台歯のシェードと最終的に求めるシェードの組み合わせで決まります。この2つから、推奨する材料をホームページ上で選択できます(④)。

<http://www.ivoclarvivadent.com/e.max-shade-selection>

MTでは基本的にHTと同じシェードを推奨しており、近日中にMTに対応したバージョンが発表される予定です。プレスプログラムもHT用のプログラムで対応できます。


冒頭のキャッチフレーズ通り、Multiに続きMTと話題に事欠かないIPS e.max は、世界を先駆けるオールセラミックスシステムとして進化を続けています。新しいモノをいち早く取り入れて取引先に紹介することで、「情報に敏感なラボ」として、先生の信頼もきっとアップするのではないのでしょうか。世界でも発売されたばかりの旬な製品を、是非いち早くお試しください！



① MTが加わった、新たな透明度の分類

V1	MT B1
V2	MT BL4
V3	MT BL3

② VシェードとMTシェードの対応

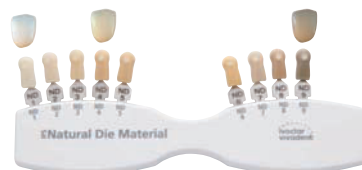

③ 支台歯色による影響
(修復物は全て同じHT B1シェード)



④ IPS e.max シェード選択ホイール



IPS e.max プレス MT 5個 × 1

標準価格 ¥16,800

(BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, B1)


Information

Seminar / Event

Ivoclar Vivadent K.K.
News Letter
FOR YOU Vol.73
2015/3/2

- 内容
- 対象
- 講師
- 受講料

2015年 3月～4月

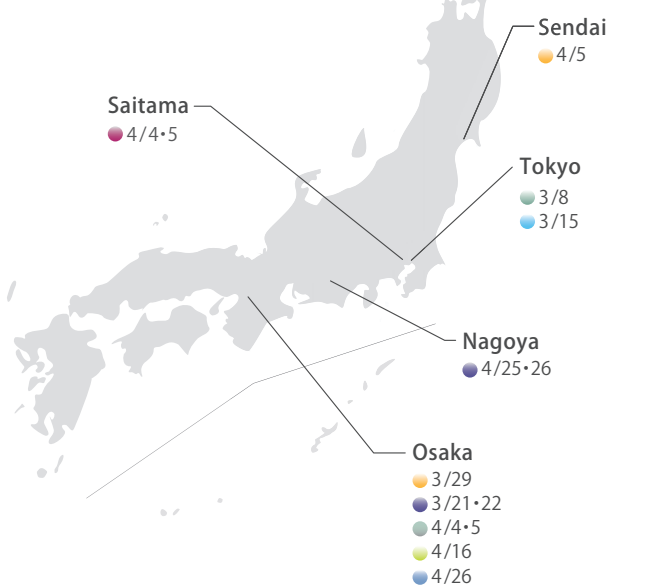

IPS e.max CAD ソリューション実践コース

講師 佐々木 英隆 先生 東京 | 5/10 | 大阪 | 4/26
IPS e.max キャド 臨床使用への導入コース
対象 歯科医師、歯科技工士 受講料 ¥ 40,000円 (消費税込、材料、昼食代を含む)

IPS e.max プレス 導入 1 dayコース

講師 ICDE トレーナー 札幌 | 6/13 | 名古屋 | 5/9
青山 誠 先生 仙台 | 5/17
青木 隆浩 先生 大阪 | 6/21
廣末 将士 先生 福岡 | 7/18
IPS e.max プレスの臨床使用を開始して頂くための導入コース
対象 歯科技工士 受講料 ¥ 15,000円 (消費税込、材料、昼食代を含む)

IPS e.max Press 実践コース

IV プレス器ユーザー様 限定

講師 打越 秀樹 先生 札幌 | 6/14
森口 光成 先生 名古屋 | 5/10 | 福岡 | 7/19
赤坂 政彦 先生 東京 | 5/17 | 大阪 | 3/29、6/20
カットバックとマルチインゴットを使用した製作を学ぶためのコース
対象 歯科技工士 受講料 ¥ 20,000円 (消費税込、材料、昼食代を含む)

若竹哲也先生によるインプラントを極める

IV プレス器ユーザー様 限定

東京 | 5/30・31
IPS e.max プレスをインプラントに応用するためのコース
対象 歯科技工士 受講料 ¥ 50,000円 (消費税込、材料、昼食代を含む) 講師 若竹 哲也 先生

都築優治先生によるインプラントを極める

IV プレス器ユーザー様 限定

大阪 | 4/4・5
IPS e.max プレスをインプラントに応用するためのコース
対象 歯科技工士 受講料 ¥ 50,000円 (消費税込、材料、昼食代を含む) 講師 都築 優治 先生

イボベース 無料体験セミナー

仙台 | 8/30 | 東京 | 6/18 | 大阪 | 4/16、5/24 | 福岡 | 9/3
イボベース システム導入のための実習体験コース
対象 歯科技工士 受講料 ¥ 無料 講師 ICDE トレーナー

BPS クリニカル入門コース

講師 佐藤 貴映 先生 東京 | 3/15
BPSの各ステップの術式や考え方をわかりやすく解説する基本コース
対象 歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士、歯科助手 受講料 ¥ 10,000円 (消費税込)

製品詳細

新製品 詳細

IPS e.max プレス MT	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	B1
単位：各 5 個 × 1 / 標準価格 16,800 円	668891	668770	668771	668756	668757	668758	668759

製品番号	製品名	単位	標準価格	EAN コード	JMDN	クラス	備考
674958	プラスチックピーカー	10個×1	800	04580300710718	-	雑品	556007 代替品

アドヒース ユニバーサル 製品番号 詳細

製品番号	製品名	単位	標準価格	変更点
663723WW	アドヒース ユニバーサル VivaPen	1セット	13,000	製品番号 664504WWに変更

在庫限りで販売終了となる製品

製品番号	製品名	単位	製品番号	製品名	単位
635562	IPS e.max プレス インパルス V1	5個×1	558947AN	バリオリンク II アソートメント	1セット
635558	IPS e.max プレス インパルス V2	5個×1	558959AN	バリオリンク II Try-In アソートメント	1セット
635559	IPS e.max プレス インパルス V3	5個×1	628323AN	バリオリンク II イントロパック M+	1セット
635566	IPS e.max プレス インパルス V1 L	3個×1	577276AN	オプトラコンタクト アソートメント	1セット
635567	IPS e.max プレス インパルス V2 L	3個×1	582165AN	オプトラコンタクト 小白歯用	1本
635568	IPS e.max プレス インパルス V3 L	3個×1	582166AN	オプトラコンタクト 白歯用	1本
573086	SR アドーロ アドオン ニュートラル	3g×1			

お年玉クイズ 回答

今年の答えは…人気沸騰中のボンディング材「ビバペン」でした！
ご応募を頂いた正解者の方には、3月下旬にプレゼントを発送させていただきます。
今回もたくさんのご応募を頂き、ありがとうございました。

