

OptraGloss[®]


ジルコニア・オールセラミックス・CR 兼用ユニバーサル研磨システム オプトラグロス



効率と美しさを追及した

ダイヤモンドポリッシャー

OptraGloss®

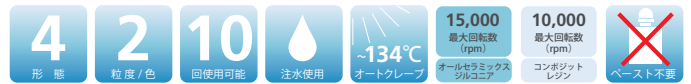

オプトラグロス

ジルコニア、オールセラミックス、CRにはオプトラグロス



治療の効率を上げるユニバーサルポリッシャー



コントラ用のオプトラグロスは様々な材料を研磨できるユニバーサルポリッシャーです。効率的に修復物を滑沢にし、高い光沢をわずか2種類の研磨性(PPプレポリッシャー/HPハイポリッシャー)で得られます。特にIPS e.maxの研磨にどのポリッシャーを使用すれば良いかお悩みの歯科医師の先生におすすめします。

1ステップ、または2ステップで高い光沢

高密度のマイクロダイヤモンド粒子が最大70%wt含有していることで、優れた研磨結果を得られます。CRの場合は1ステップで、ジルコニア、オールセラミックスの場合は2ステップと短時間で高い光沢感と滑らかさを得られます。

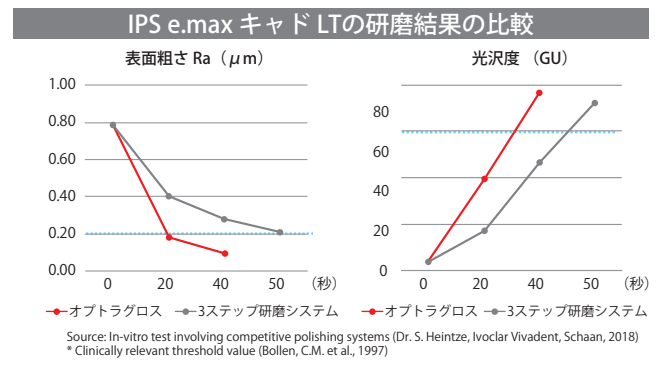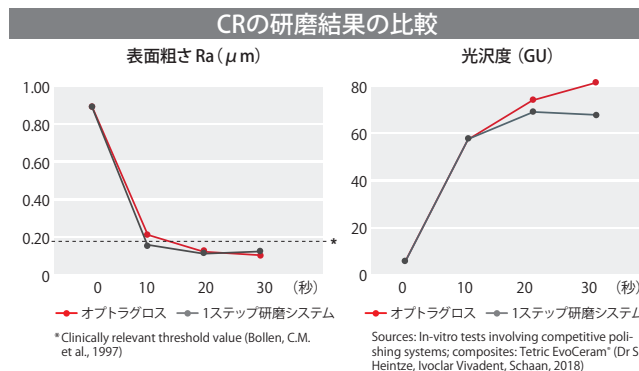

コントラ用	形状			
	フレーム	カップ	ディスク	スパイラルホイール
PP (粗研磨) ダークブルー				
オールセラミックス ステップ① (例: ニケイ酸リチウム、ジルコニア、リユースイトガラスセラミックス)				

コントラ用	形状			
	フレーム	カップ	ディスク	スパイラルホイール
HP (研磨) ライトブルー				
オールセラミックス ステップ② (例: ニケイ酸リチウム、ジルコニア、リユースイトガラスセラミックス) または、コンポジットレジン ステップ① (例: CR、ハイブリッドレジン、セメント類)				

製品内容

オプトラグロス アソートメント

684548AN

ポイント (7種類) 各2本
PPフレーム/ PPカップ/ PPディスク
HPフレーム/ HPカップ/ HPディスク
HPスパイラルホイール



オプトラグロス プロモパック

684555AN

ポイント (7種類) 各1本



オプトラグロス コンポジット プロモパック

701870AN

HPポイント (4種類) 各2本



オプトラグロス リフィル

各10本

684553AN PP フレーム
684549AN PP カップ
684551AN PP ディスク

684554AN HP フレーム
684550AN HP カップ
684552AN HP ディスク
721094AN HP スパイラルホイール

一般的名称: 歯科用研磨器材 / 販売名: オプトラグロス / 届出番号: 13B1X10049IV0044 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24
TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0044L04

