

# Monobond<sup>®</sup> Plus


モノボンドプラス



## オンリー 1 プライマー

複雑な世の中だから、プライマーぐらいシンプルに

  
ivoclar<sup>®</sup>  
vivadent<sup>®</sup>  
passion vision innovation

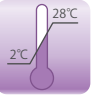

# Monobond<sup>®</sup> Plus

オンリー 1 プライマー | モノボンドプラス

One primer for all restorative materials

どのボトルを使うのか... もう迷うことはありません。

1 bottle ..... これ1本で...

ひとつになって便利だけでなく、弊社従来品を凌ぐ物性を持っています。  
これによりひとつのプライマーであらゆる補綴物に使用でき、強固で耐久性のある接着をサポートします。

1 primer ..... ひとつのプライマーで...

セラミックスにはシラン系プライマー、酸化ジルコニウムにはリン酸系プライマー、金属にはイオウ系プライマー。  
3つの異なる機能が Ivoclar Vivadent の技術でひとつのボトルに入りました。


あらゆる補綴物に。

- ガラス セラミックス
- 酸化アルミニウム セラミックス
- ノンプレシャス合金 (Ti・Co-Cr 等)
- 酸化ジルコニウム セラミックス
- 貴金属合金 (白金加金・金合金等)
- 間接修復用コンポジット

1 minute ..... ひとつの操作方法で...

モノボンドプラスはあらゆる補綴物を、同じ時間で前処理します。

ステップ

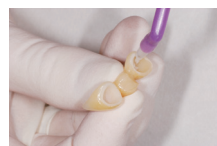

塗布



60 秒反応、エアードライ



## 製品内容 / 関連製品

### モノボンドプラス

626221AN 5g × 1



### イボクリン

637568AN 5g × 1

口腔内試適後の修復物内面クリーニング液  
内面に塗布し、20秒後水洗・エアードライ  
するだけの簡単操作です。



一般的名称：歯科セラミックス用接着材料（歯科用象牙質接着材、歯科金属用接着材料）/販売名：モノボンドプラス / 認証番号：223AGBZX00093000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0027B10

ivoclar  
vivadent<sup>®</sup>  
passion vision innovation